

PULPDENT®



ETCH-RITE DENTAL ETCHING JEL

%38 Fosforik Asit – Dentin, Mine ve Cam İyonomer Simanlara Asit Etch uygular.

Etch-Rite üstün kaliteli bir dental etch jeli olup, çalışma kolaylığı sağlayan özel tasarlanmış viskozitesi ve tiksotropik özelliği sayesinde uygulandığı yerde kalır ve açığa çıkmış dentin veya dokulara akmaz. Özel formülü sayesinde tamamen yıkanır ve artık bırakmaz. Mine ve cam iyonomerleri 20 saniye zarfında etch eder. Önceden eğri olarak hazırlanmış şırınga uçları materyalin dentin yüzeyinde arzu edilen yere yerleştirilmesini sağlar.

ETCH

Etch-Rite Seti 4 adet 1.2 ml.
şırıngada jel + 8 uygulama ucu



ET-6 ET-12

Etch-Rite 6 ml. şırınga

Etch-Rite 12 ml. şırınga

ET-50

Jumbo şırınga 2 x 25 ml. (64 gr.)
büyük şırınga, 5x3 ml. boş şırınga,
50 uygulama ucu



4. Jenerasyon Çok Amaçlı Dental Adeziv Sistemi Hidrofilik – Dual Cure

Dentin, mine, porselen, rezinler, kıymetli ve kıymetsiz metal ve amalgam. DENTASTIC PMGDM'yi NTG-GMA 'nın magnezyum tuz teknolojisiyle bir arada kullanır. Araştırmalar bunun eski PMDM formüllerinden, yapışma gücü ve raf ömrü açısından üstün olduğunu göstermektedir. DENTASTIC dental adezivlerin sırrını çözerek tüm diş ve restoratif yüzeylere bağlanabilen, hızlı ve rahat kullanılabilen bir sistem sunar.



DAS

DenTASTIC Adziv Sistemi

6'şar ml. DenTASTIC Primerler A, B & C
6'şar ml. DenTASTIC Dolgunsuz Resin Bonding Ajanı 1 & 2
5 ml. Etch-All, %10 fosforik asit jel
1.2'şer ml. Porselen Etch Jel,
Kurutucu Ajan ve Silan
Aksesuarlar

DAS C1 DenTASTIC Refill Seti
6'şar ml. DenTASTIC Primerler A, B & C
6'şar ml. DenTASTIC Dolgunsuz Resin
Bonding Ajanı 1 & 2
5 ml. Etch-All, %10 fosforik asit jel
Kullanım Kılavuzu

DAS-C2 Aksesuar Kit 50 gode, 20 etch jel,
uygulama ucu, 100 fırça ucu, 2 fırça
sapı,

DAS 0 Adeziv Primer A,B,C 3x6 ml.
DASP 1 Bonding Ajan 6 ml. P1 baz (ışıkla aktif)
DASP 2 Bonding Ajan 6 ml. P2 katalist (ışıkla aktif)
DASP A Dentin Mine Primer 6 ml.
DASP B Universal Baz 6 ml.
DASP C Metal Primer 6 ml.

DENTASTIC UNO



Uno

5. Jenerasyon Tek Basamaklı Islak Bonding Dental Adeziv Işıklı ve/veya Dual Cure Adeziv UNO tüm direkt bonding uygulamalar için ışıklı dental adeziv ve hassasiyet gidericidir.

UNO 2x6 ml. DenTASTIC UNO, 5 ml. Etch-Rite etch jel
Aksesuarlar
UNO-R 6 ml. şişe yedeği DenTASTIC UNO

Endirekt restorasyonlar ve self cure ya da dual cure endikasyonlarda
UNO DUO
UNDO 6 ml. UNO, 3 ml. DUO, 5 ml. Etch-Rite jel
Aksesuarlar
DUO 3 ml. DUO

AĞIZDA PORSELEN TAMIRİ

Porselen Tamir Seti

Tek ekonomik sette Porselen Etch Jel, Kurutucu Ajan ve Silan Tercih ettiğiniz kompozit veya rezin simanla kullanabilirsiniz.

1.2'şer ml. Porselen Etch Jel ve Silan, 2x1.2 ml. şiringada Kurutucu Ajan ve 8 uygulama ucu



Opaker (ışıklı)

Metal ve renklenmiş diş yüzeylerini maskeler. Dental adezivler, bonding ajanları, kompozit rezinler ve rezin simanlara bağlanır. Diş rengi veya beyaz renk seçeneği vardır.

OP1 3 ml. şiringa diş rengi tonu
OP2 3 ml. şiringa beyaz renk



Kool-Dam (ışıklı)

Isı vermeyen Sıvı Bariyer & Bloke eden rezin, Polimerize olunca ısı vermez. Akmaz, uygulanan yerde kalır. Esnek kauçuk gibi donar. Yırtılmaya direnglidir, rahatlıkla uzaklaştırılabilir. Dokuları, dişleri ve restorasyonları beyazlatma ve mikroabrazyon esnasında korur. Hidrofiliktir, ağız ortamında çok rahat uygulanır. Beyazlatma kaşığı modellerine yapışır. Undercut'ları bloke eder. Rubber dam'lardaki yırtıkları bloke eder. İyi bir renk kontrastı sağlar.

PD 2x3 ml. şiringa + 20 uygulama ucu



AĞIZDA PORSELEN TAMİRİ YEDEKLERİ



Porselen Etch Jel


%9.6 hidroflorik asit üstün kaliteli ve hızlı çalışır. Porselen, kompozit veya rezin silanda leke bırakmaz. 2 dakikalık Etch uygulama porselene bonding için en uygun yüzeyi sağlar.

PEG 4x1.2 ml. şırıngada jel + 8 uygulama ucu

Dry-Rite Kurutucu Ajan

Etch edilmiş porselen yüzeyleri silan uygulanmadan önce kimyasal olarak kurutur. Silanın başarılı olabilmesi için uygulanan yüzeyin tamamen kuru olması gerekir.

DRY 4x1.2 ml. şırınga + 8 uygulama ucu

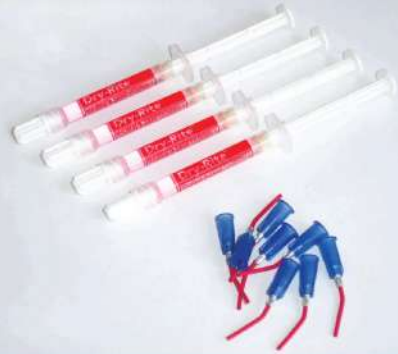

Silan Bond Desteği

Tek basamaklı ürün kompozitler, rezin simanlar gibi organik rezinlerin porselene bağlanma gücünü artırır. Etch edilmiş ve kurutulmuş porselen yüzeylere uygulanır.

SIL 4x1.2 ml. şırıngada Silan + 8 uygulama ucu



Resilute

ÇOK AMAÇLI REZİN SİMAN Dual Cure – Flor Serbestleştirir

Tüm metal döküm, post ve seramik, lamineyit venerler, inleyler, onleyler gibi indirekt seramik ve kompozit restorasyonların ve kronların kalıcı simantasyonu için kullanılır. Baz ve katalist karıştırılarak çok kuvvetli 15 mikron film kalınlığı ve 2 renk seçeneği olan radyopak yapıştırıcı elde edilir.

Oksijen engeli uzun çalışma süresi sağlar. Kimyasal polimerizasyonu 6 dakikada gerçekleşir.

RES-C Şeffaf renk, 4 gr. Baz, 4 gr. Katalist + 1.2 ml. OxOut oksijen engelleyici jel

RES-U Üniversal renk, 4 gr. Baz, 4 gr. Katalist + 1.2 ml. OxOut oksijen engelleyici jel



Hardcore

KOR YAPIMI MATERYALİ

Dual Cure – Flor Serbestleştirir

Kırılmış dişleri yeniden oluşturmak için ekstra güçlü bir restoratif malzemedir. Post korları kolaylıkla hazırlanabilir ve kor formları bu işlemi hızlandırır.

2 patlı dual cure sistem beyazımsı rengeyle dentinden kolaylıkla ayrılır. Kolay karıştırılır, çok sert polimerize olur. 4 ayrı boydaki kor formları rahatlıkla tutulur ve kesilir. Işıkla ve kimyasal polimerize olur.

HC 20 gr. Baz, 20 gr. Katalist, 20 kor formu + aksesuarlar

HCF-AS Kor formları, 164'lük kutuda asorti



Perio Care

PERİODONTAL PAT

Cerrahi İşlem Sonrası İyileşen Dokuyu Korur

2 patlı çok elastik bir sistem olan Perio Care aynı zamanda çok serttir ve ağızda parçalanıp dağılmaz. Periodontal cerrahiden sonra dokuların etkili bir şekilde korunmasını, bakteri üremesinin engellenmesini sağlar. 90 saniye zarfında Perio Care ıslak parmaklarla rahatlıkla tutulabilir. 7 dakikalık çalışma süresi vardır ve 15 dakikada polimerize olur. Ojenol içermez, hasta memnuniyeti sağlayan hoş kokuludur.

PC PeriCare Set: 3 oz. Tüpte pat, 3 oz. Tüpte jel, karıştırma kağıdı





Restorasyon ve Porselen T.Seti

Çok amaçlı set: Primer, koruma,opaker,silan,bitirme ve cilalama sağlar.

Hafif nemli yüzeylere bağlanır.

Metal ve seramik primerlere , silan ve bonding ajanlara gerek kalmaz.

Restoratif kompozitlerle uyumludur.

Solventlere, karıştırmaya ve karışıklığa gerek kalmaz.

Tüm ışık cihazlarıyla uyumludur.

5 ürün içerir

- Embrace First-Coat Tek basamaklı bonding kimyasal ve mekanik olarak hazırlanmış seramik ve metal yüzeylere bağlanır. Solvent içermez..
- Embrace Seal-n-Shine tamir edilmiş yüzeye penetre olup silan vazifesi de görerek parlattır..
- Embrace Opaker kimyasal ve mekanik olarak metal, seramik ve diş yüzeylerine bağlanır. 20 saniye light cure,
- Kool-Dam sıvı bariyer yumuşak dokuyu, dişleri ve restoratif yüzeyleri korur. Işık polimerizasyonu sonrasında da esneklik.
- Porselen Etch Jel %9.6 hidroflik asit, porselene 2 dakika süreyle etch olarak uygulanır.

EMPFM Set içeriği: 1.2'şer ml. First-Coat, Seal-n- Shine, Opaker, Porselen Etch Jel, Kool-Dam ve aksesuarlar

EMFC

EMOP

1.2 ml. şırıngasa Embrace First-Coat + 10 adet uç

1.2 ml. şırıngada Embrace Opaker

EMBRACE WETBOND

Seal-N-Shine Bitirme ve Cilalama Rezini



Işıkli – Islak Bonding – Şeffaf Renk

Kompozitleri ve marjinal kenarları mühürler, mikrosızıntıyı ve marjinal sınırları yok eder. Dişle bütünleşerek restorasyonların bitirme ve cila aşamalarını sağlar. Hafif nemli ortamda bağlanabilir ve tüm ışık cihazlarıyla uyumludur. Beyaz çizgileri ve marjinal lekeleri yok eder, düzgün, dayanıklı ve koruyucu bir bitirme sağlar. Polimerize olduğunda şeffaftır, sarı renk kalmaz. Dayanıklı ve esnektir. Solvent, çözücü, karıştırma ve dağınıklığa gerek kalmaz. Şişede ve şiringada satılır.

EMSNS 6 ml. şişe Seal-n-Shine, fırça sapı, 100 adet fırça ucu

EMSNY 2x1.2 ml.şiringada Seal-n-Shine + 40 fırça ucu





Üniversal Rezin Siman

Dual Cure – Islak bonding – Flor serbestleştirir

Etch, kurutma ve bonding ajanları ve hassasiyete son verir.

PFM, altın CEREC ve destekli seramikleri, kron ve köprüleri simante eder.

Marjinal sınırı yoktur, dişle bütünleşir, mikrosızıntıyı önler. Hafif nemli yüzeylere bağlanabilir. 12 mikron kalınlığı ve dentine kendinden etch'li ve adezivli özelliği vardır.

Primer, silan ya da bonding ajanları gerekmez. Polimerize olduğunda rengi sabittir. Otomix veya standart şiringada satılır.

EMCA 7 gr. Otomix şiringada siman, 20 otomix ucu, 1.2'şer ml. Seal-n-Shine ve OxOut, aksesuarlar

EMCAR Otomix şiringa refill: 7 gr. Otomix şiringa siman 20 otomix ucu

EMCX Aksesuar set: 1.2'şer ml şiringada Seal-n-Shine ve OxOut, uygulama uçları

EMBRACE WETBOND



Klas 5 Servikal Restoratif Rezin

Işıklı -Flor Serbestleştirir – Islak Bonding – Radyoopak Bonding, silan ve hassasiyet giderici olarak bonding ajanla ya da ajansız kullanılabilir. Özellikle Klas 5 restorasyonlar için üretilmiştir. Marjinal sınırı yoktur, dişle bütünleşir, mikrosızıntıyı yok eder. Hafif nemli ortamda bağlanabilir, dentine self-etching veya self adeziv olarak bağlanır yani primer ya da bonding ajanlara gerek kalmaz. Kırık veya açığa çıkmış kökleri tedavi eder ve hassasiyetini giderir. Esnek, dayanıklı ve serttir. Marjinal uyumu, yapışması ve retansiyonu mükemmeldir. Tüm ışık cihazlarıyla uyumludur. 4 rengi mevcuttur:A2, A3.5, B2, D2

EMV 1.2'şer ml. A2, A3.5, B2, D2 renklerdeki şırıngalarda , 1.2 ml. Seal-n-Shine + aksesuarlar

EMV* 1.2 ml. şırıngada tek renk (A2 veya A3.5 veya B2 veya D2) + aksesuarlar

KÖK KANAL TEDAVİSİ ÜRÜNLERİ

Pulpdent Paste - TempCanal Multi-Cal

Bakterisit , Baktériostatik, Radyopak, pH> 12 Her üç ürün de aynı benzersiz sonuçları sağlar.

Değişik viskoziteler ve ambalaj opsiyonlarından istediğiniz ürünü seçebilirsiniz.

Antimikrobik kanal dolgusu olarak karmaşık endodontik vakalarda rutin hasta ziyaretleri esnasında uygulanır. Pulpdent Paste, TempCanal ve Multi-Cal kurur ancak sertleşmezler ve böylelikle kanaldan, kanal eşiyle ve yıkanarak rahatlıkla uzaklaştırılabilirler. İltihaplı dişlerde ve başarısız

kök kanallarında cerrahisiz bir çözüm getirirler. Kanalları dezenfekte eder, dişin hararetini alır ve pulpal dokudan arta kalanları düzenlerler. Tehlikeli formokresol maddesinin yerini alırlar. Karıştırılmaya ya da kondanse etmeye gerek yoktur. Periapikal lezyonların, kist ve iltihapların tedavisinde kullanılır. Kanamalarda, akan kanallarda, travmaya uğramış dişlerde başarılıdır ve kök rezorpsiyonunu engeller. Kök çatlaklarını ve perforasyonlarını, iç ve dış kök rezorpsiyonlarını tedavi eder. Apeksifikasyonu destekler.

Direkt Pulpaya uygulanarak da takip edilir.

PSYK	Pulpdent Paste set : 3 ml. şırınga + 24 adet 18'lik iğne
PSY	Pulpdent Paste 3 ml. şırınga
PTCK	TempCanal set : 3 ml. şırınga + 12 adet 22'lik ve 25'lik iğne
PTC	TempCanal 3 ml.
MULTI	Multi-Cal set : 4x1.2 ml. şırınga + 8 adet uygulama ucu
MULTI-3	Multi-Cal 3 ml. şırınga



Kök Kanal Dolgusu

Endodontik Dolgu Materyali, Doku Uyumlu, Bakteriostatik, Radyopak tüm kalıcı dolgu tekniklerinde kullanılabilir: Basınçlı Şırınga, Lentülo ve Lateral Kondensasyon. Gerek süt gerek kalıcı dişler için endikedir. Toz ve likit karıştırılarak kalın bir karışım elde edilirken serbest öjenol bertaraf edilip hasta rahat eder. Sertleştikten sonra rahatlıkla mekanik olarak ya da el aletiyle uzaklaştırılabilir. Yerleştirildikten sonra hafifçe genişleyerek sağlam bir mühür oluşturur. Çürük dişlerin kökü tarafından rezorbe olur. Doğrudan apekse uygulamak için 30'luk iğne ucundan yararlanılabilir. Kök kanalında çözülmez. Taşkın uygulama zaman içerisinde rezorbe olur.

RK Kök Kanal Dolgu Seti: 15 cc toz, 7.5 ml. likit, karıştırma kağıdı, kaşık.



DiĞER ÜRÜNLERİMİZ



Dentin Hazırlama Seti

%22 Poliakrilik Asit – Dentindeki smear tabakasını bonding ve simantasyon öncesi uzaklaştırır.

Cam iyonomer siman veya diğere dentin bonding materyallerini uygulamadan önce sadece 20 saniye bu moleküler ağırlığı yüksek poliakrilik asit dentine uygulanarak dentindeki bulaşık tabakayı uzaklaştırmayı sağlar.

DEN 4x1.2 ml. şırıngada jel + 8 uygulama ucu

DEN-3 3 ml. şırıngada jel

File-Rite

Kanal Lübrikantı
%17 EDTA lübrikantıdır. Kanal duvarlarını dekalsifiye eder ve kanal aletlerinin kullanımını kolaylaştırır.

FILE 4x5 gr şırınga + 50 adet uç



Edta Soüsyon

%17 Kök kanallarına kanal eğelerinin uygulanması ve smear tabakasının uzaklaştırılması için kullanılır. Aktif bir yumuşatıcı ajandır ve kanal duvarlarını dekalsifiye eder. Nötr bir PH' vardır.

EDTA-30 30 ml. şişe
EDTA-60 60 ml. şişe



DiĞER ÜRÜNLERİMİZ



Lime-Lite

Işıklı Kavite Örtüsü

Pulpal Hassasiyeti Azaltır

Günümüz adeziv dişhekimliğinde kullanılmak üzere özel formüllüdür.

Hydroksiapatit içerir, üniversal renktedir, radyopaktır ve flor serbestleştirir.

Polymerize edildiğinde çok sert olur. Kimyasal olarak adeziv ve kompozitlere

bağlanır. Yararlı kalsiyum, hidroksil, fosfat ve flor ionları serbestleştirir. Sekonder

dentin formasyonunu destekler. Su ve tükürükte çözülmez.

LIME 4x1.2 ml. şırınga + 8 uygulama ucu

LIME-3 3 ml. şırınga

Snoop

Konservatif Kavite Preparasyonu İçin Çürük Detektörü
Snoop dış ve iç enfekte dentini 10 saniyede ayırıştırır. Koyu mavi renk dentin ve pulpaya farklılığıyla kolayca ayrılır. Propilen glikol formül enfekte dentini tam olarak tespit eder.

SNOOP 12 ml. şişe



Des

Dentin Hassasiyet Giderici

Suda %5 glüteraldehid ve stabilitesini artıran flor içerir. Tüm dentin yüzeylerine uygulanır.

Primer değildir ancak adeziv ve kompozitlerle

ve de geleneksel simanlarla bir arada kullanılabilir. Bonding veya

bağlanma gücüne etkisi yoktur.

DES 12 ml. şişe



DiĞER ÜRÜNLERİMİZ

Bausch

ARTİKÜLASYON KAĞIDI

Bausch artikülasyon kağıtları basınca hassas ve ilerleyen renk transferi elde etmek üzere üretilir. Daha kuvvetli ısırtmak daha koyu bir iz oluşturur. Özel hidrofilik mum emdirilmiş (kaplanmış değil) artikülasyon kağıtları ıslak veya kuru alanlarda hep başarılı sonuç verirler.

Bausch marka artikülasyon kağıtları değişik renk, ebat, şekil ve kalınlıkta üretilmektedir. Ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcimizle görüşebilirsiniz. Bazı ürünlerimiz broşürde örneklenmiştir.

- BK-01** Mavi, düz, 200 mikron, 300'lük plastik kutuda
BK-02 Kırmızı düz, 200 mikron, 300'lük plastik kutuda
BK-03 Mavi, at nalı, 200 mikron 50'lik kutu
BK-1001 Mavi BK-01 refill 300'lük paket
BK-1002 Kırmızı BK-02 refill 300'lük paket
BK-23 Mavi, tek taraflı, 8 mikron 22x20 mt. rulo
BK-28 Siyah/kırmızı, çift taraflı, 8 mikron 22x20mt. rulo



Rainbow Ahşap Kama

4 değişik renk kod ve ebatta dayanıklı ahşap kamalar anatomik kontürlü olup gingival dokuyu tahriş etmez.

W Rainbow Kama Başlangıç Seti 400'lük kutu, 4 asorti renk

W* 100'lük refill tek ebat

*Mavi: 12 mm. Yeşil: 13 mm. Sarı: 15 mm. Beyaz: 17 mm.



Pic-N-Stic

Küçük Parçalar İçin Orijinal Kulp

Bu kullanışlı ürün diş hekimliğinden model yapmaya, işitme cihazı pili yerleştirmeye kadar bir çok alanda yardımcıdır. 2,5" uzunluğunda çubuk 2 mm çapında olup ucu adezivlidir.

Parmakların ulaşamadığı yerlerdeki nesnelere rahatlıkla ulaşım kaldırabilir ve bu nesnelere bir kişiden diğerine aktarılmasını kolaylaştırır. Kron, inley, venter, band, braket, reamer, kelepçe hassas ataşmanlar, implant vidaları ve sayısız nesneyi rahat ve güvenli taşır.

Pic-n-Stic ofiste, evde hobi köşenizde ekstra parmaklar olarak hep yardımcıdır.

Kibrit kutusu tarzında ambalajı da kullanım kolaylığı sağlar.

PIC 60'lık kutu



DIĞER ÜRÜNLERİMİZ



Sparkle

Elmas Cila Pati

Porselen, altın, kompozit ve metali mükemmel cilalar. Rahatlıkla yıkanıp uzaklaştırılır.

SPARK Sparkle Set:4x1.2 ml. şiringa

Flexible Scaler

Plak, tartar ve lekeleri ön dişlerin interproksimal kontak noktalarından uzaklaştırır.

Çizmeden cilalar. Mineye zarar vermez. Her türlü sterilizasyona dayanıklıdır ve yeniden kullanılabilir. Cerrahi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

FLEX Flexible Scaler 2 metre rulo



Wonder Orange

Tamamen Doğal Temizlik Losyonu
Üstün kaliteli, konsantre, lanolinli portakal solventi, çinko oksit simanlar, ölçü malzemeleri ve güçlü bir organik temizleyicinin gerektiği her yerde rahatlıkla kullanılır. Pulpdent Basıncılı Şiringanın temizliğinde de kullanılır. Suni katkı maddesi yoktur.

WO-8 Wonder Orange 8 oz.



PULPDENT CORPORATION

Pulpdent Corporation 1947 yılında kurulmuş bir aile şirkettir.

Firmanın üretim kapsamı geniş bir yelpazede dental ürünler olup, bunlar arasında dental adezivler, bonding aksesuarları, flor serbestleştirici kompozitler, fissür örtücüler, kor materyalleri ve özel simanlar, asit etch ürünleri, kalsiyum hidroksit ürünleri, kök kanal silanları, periodontal patlar, paslanmaz çelik aletler ve plastik ve kauçuk esaslı ürünler vardır.

2002 yılında Pulpdent ileri hidrofilik rezin teknolojiyle Embrace Wetbond, nemli yüzeye bağlanabilen ilk rezin bond ürünlerini piyasaya tanıttı.

Altmış yıl sonra, günümüzde, Pulpdent her zamankinden daha da güçlü ve bağımsız olarak kimya laboratuvarı ve tam otomatik makine parkıyla üretim ve araştırma ve geliştirme tesislerinde çalışmalarına devam etmektedir. Pulpdent'in başarısının ardında firma sahipleriyle güçlü ve kenetlenmiş ekibinin kaliteye, müşteri hizmetlerine ve uzun vadeli müşteri ilişkilerine verdikleri önem yatmaktadır. Sekseni aşkın ülkede satışa sunulan Pulpdent ürünleri, araştırma, ürün geliştirme ve üretim üstünlüklerinin yanı sıra müşteriye bağlılık ilkesiyle dünya piyasasındaki rakipleriyle arasında fark yaratmaktadır.

MEDİFARM

Medifarm Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. dental sektördeki faaliyetine 1991 yılında ortodonti malzemeleri mükemmeliyetiyle başladı ve 1993 yılına kadar sadece bu alanda çalışmalarını sürdürdü. Bu tarihten itibaren bazı dental ürünlerinin de tanıtım ve dağıtımını üstlendi. Bu arada ortodonti dalında belli başlı birçok yabancı firmayla da çalışmalarını sürdürdü. 1995 yılından itibaren dental ürünler yelpazesini daha fazla genişleten Medifarm, bugün yirmiye aşkın firmanın ithalatçısı ve Türkiye mükemmeliyeti. 15 yıldır sektörde bulunan Medifarm kurulduğu günden bu yana hizmeti ilke edinmiş ve aynı amaca hizmet eden ekibiyle hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalarına devam etmektedir. 2005 yılında Medifarm'ın kaliteye yolculuğu başladı ve güvenli ve güçlü ekip çalışması ve dayanışması ve sürekli eğitimle 2006 yılında ISO 9001 belgesine hak kazandı. Medifarm kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen bu yolculuğunu her zaman daha iyiyeye doğru sürdürmeyi hedeflemektedir.



Medifarm Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

Eminalipaşa Cad. 118/1 D:10 Kat:4 PK: 34744 Bostancı - İSTANBUL

Tel: 0216 380 18 11 - 380 19 98 Fax: 0216 410 02 63

web: www.medifarm.com.tr - e-mail: info@medifarm.com.tr